

Zmiany w ofercie ortez stawu kolanowego



Quality for life

Genu Therma, Genu Carezza, Genu Direxa

Produkty wycofane i (zmodyfikowane 8357 i 8367)



Nowe produkty serii Therma, Carezza i Direxa

Ujednolicona kolorystyka całej linii kolan

Dopasowane wzornictwo do ortezy Patella Pro




Zmiany w linii Genu Therma

Nowe oblicze Genu Therma i Genu Therma Patella



- Nowa kolorystyka
- Ten sam produkt

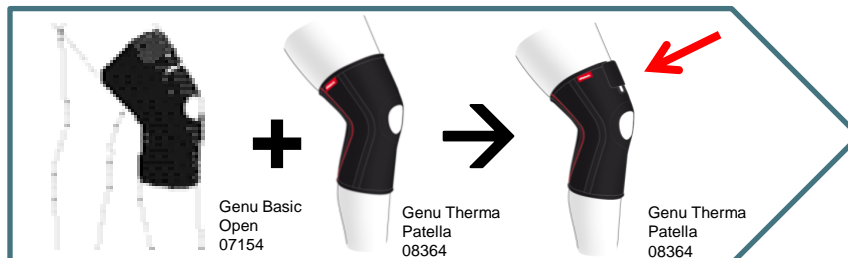

Genu Therma & Genu Therma Patella
 → Dodatkowe zapięcie Velcro w górnej części ortezy dla lepszego dopasowania

Zmiany w linii Genu Carezza

Nowy materiał w nowym kolorze



- Cieńszy materiał o grubości 2,3 mm. Czerwony kolor materiału wewnątrz ortezy, o strukturze jak w Patella Pro (poprzednia grubość szarego materiału: 3,0 mm.)

Zmiany w linii Genu Direxa

Nowe oblicze Genu Direxa Stable i Genu Direxa Stable Wraparound



- Wycofanie produktów serii Genu Direxa Stable Long
- Dwa nowe produkty z lepszą funkcjonalnością i użytecznymi cechami o symbolach 8359 i 8368 nawiązujące do wcześniejszych, szarych produktów 8357 i 8367
- Genu Direxa 8353 i 8356 – nowy materiał w nowym kolorze.



Nowa Genu Direxa Stable

Lepsza funkcjonalność



- Mocne, czerwone pętle ułatwiające wciąganie ortezy
- System ułatwiający wyciąganie szyn z kieszeni bocznych
- Szyny z możliwością regulacji zakresu ruchu z nowymi kątami ograniczników (Click-2-Go-system)
- 2 dodatkowe paski wzmacniające z przodu
- Cieńszy materiał z otworem na rzepkę o grubości 2,3 mm, czerwony kolor materiału wewnątrz ortezy, o strukturze jak w Patella Pro
- 2 dodatkowe paski w dole podkolanowym, umożliwiające dwie opcje ustawienia:
 - Opcja 1: ustawienie równoległe przy niestabilności bocznej, np. przy uszkodzeniu więzadeł pobocznych
 - Opcja 2: ustawienie skrzyżowane zapobiegające przeprostom stawu kolanowego (bez potrzeby stosowania dodatkowych pasków!)
- Paleta ograniczników w kształcie koła

Dziękuję za uwagę.

Tomasz Stelmaszak

tomasz.stelmaszak@ottobock.pl

+48 601 51 06 51

www.ottobock.pl



Quality for life